

K-FIX®



K-wire end protector
Embout protecteur de broches

FOREFOOT SOLUTIONS™

DETAILS

- Fenêtre de blocage pour la stabilité rotatoire permettant le contrôle de la broche et son ablation manuelle



- Rotational locking slot for control of the wire and its manual removal

- Flèches de repérage



- References arrows

- Coin de blocage multi-diamètre, cranté pour un blocage fiable



- Multi-diameter locking plug serrated for secure locking

- Bouchon poussoir auto-sécable



- Ergonomic snap-off lock driver

- Design arrondi pour une bonne prise en main



- Smooth design for an easy grip

- Deux positionnements possibles pour une sélection appropriée de la taille de la broche :
 - 1^{ère} position : 0,9 à 1,4 mm
 - 2nde position : 1,5 à 2,0 mm



- Dual positioning for appropriate size selection:
 - 1st position: 0.9 to 1.4 mm
 - 2nd position: 1.5 to 2.0 mm



DESCRIPTION

Le protecteur de broche **K-Fix**[®] est un système simple et fiable de protection des patients et du personnel hospitalier contre les pointes agressives des broches de Kirschner.

Le **K-Fix**[®] évite tout risque de migration des broches, et réduit la taille des bandages.

Grâce à son système breveté "Push, Lock and Twist", sa fixation ne nécessite aucune instrumentation.

La possibilité d'utiliser le **K-Fix**[®] sur des broches pliées permet des manœuvres de rotation et de traction pour l'ablation de la broche.

Livré stérile, le **K-Fix**[®] peut être également utilisé en per-opératoire pour protéger temporairement le chirurgien contre coupures et accrocs lors de l'utilisation simultanée de multiples broches dans un champ opératoire réduit.

Le **K-Fix**[®] est conditionné stérile sous sachet individuel, dans un distributeur de 5 unités.

Le **K-Fix**[®] s'adapte à des broches de Kirschner de diamètre variable, de 0,9 mm à 2,0 mm.

- Design ergonomique
- Système unique "Push, Lock and Twist"
- Stabilité de la broche, pour une extraction manuelle
- Protège les patients et le personnel hospitalier

Brevet international en cours

Matériau : PPSU (Radel[®])

The **K-Fix**[®] pin protector is a simple and reliable system to protect patients or hospital staff from K-wires sharp ends.

K-Fix[®] prevents inward wire migration, and reduces bandages size.

Thanks to its patented "Push, Lock and Twist" system, its fixation requires no instrument.

Optional possibility of using **K-Fix**[®] on wires bent 90° angle allows rotational and traction maneuvers for the removal of the pin.

Delivered sterile, it can also be used intraoperatively to temporarily protect surgeon from cuts and pricks when placing multiple wires in a small area.


K-Fix[®] is delivered as a single sterile unit, in a 5 units dispenser.

K-Fix[®] fits K-wires ranging from 0.9 mm to 2.0 mm diameter.

- Ergonomic design
- Unique "Push, Lock and Twist" system
- K-wire stability for manual removal
- Protects patients and hospital staff

International patent pending

Material: PPSU (Radel[®])

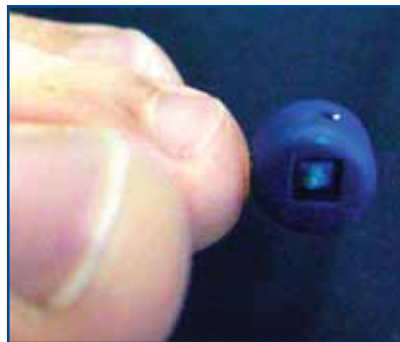

INDICATIONS

Les protecteurs de broches sont indiqués pour la protection des extrémités saillantes de broches chirurgicales de diamètre 0,9 à 2,0 mm.


The wire protecting caps are indicated for use in the protection of protruding ends of surgical wires with a diameter from 0.9 to 2.0 mm.

TECHNIQUE


recommandée par Dr. M. DELMI.
as suggested by M. DELMI, M.D.




Séparer les deux pièces
Separate the two pieces

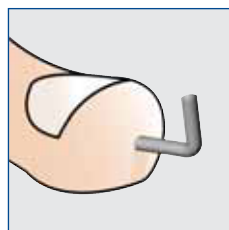


Plier la broche et la couper
7-8mm après le coude
Bend the wire and cut it
7-8 mm after the angle

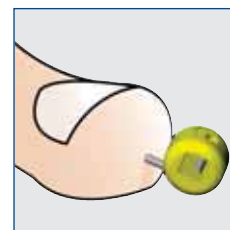


Introduire **K-Fix**® sur la
broche pliée
Introduce **K-Fix**® on the
wire previously bent

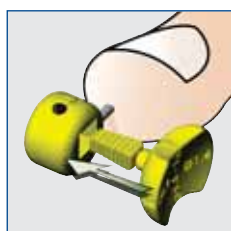


Introduire le coin dans la
direction appropriée, selon le
diamètre. (Flèche de repérage)
Introduce the plug in
adequate direction according
to wire diameter
(arrow reference)

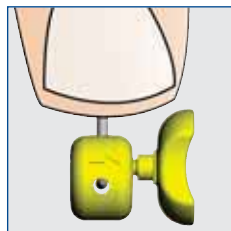

Poussez le coin jusqu'à
ce qu'il se bloque
fermement sur la broche
Push the plug until it
locks firmly on the wire

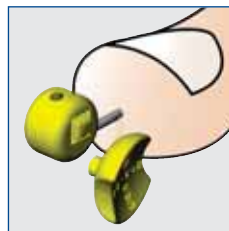

Tourner le poussoir pour
le détacher du coin
Twist the lock driver
to separate it from the
plug

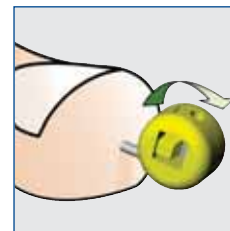

Manœuvre manuelle de
rotation et de traction pour
l'ablation de la broche
Rotational and axis
maneuver for wire removal

REFERENCE	K-Fix®	DESCRIPTION
119 050		EMBOUT PROTECTEUR DE BROCHE K-WIRE END PROTECTOR

Embouts protecteur de
broches conditionnés
sous double blister et
livrés par 5 unités

Single packed K-wire
end protectors delivered
in 5 units dispenser

Distribué par / Distributed by

CE 0120



- Voir notice d'instructions
• See Instructions for use
- Ne pas réutiliser
• Single use



- Sterile EO
- Sterile EO

STERILE EO

ND 00911-04-05

