

FISCHERMEDICAL


QUIKDRAW™

Pain Relief Orthosis

Aspen® QuikDraw PRO™ anvendes til smertelindring.


LÆS INSTRUKTIONEN FØR BRUG. Instruksen er kun vejledende. Ved eksisterende lidelser bør produktet bruges i samråd med lægen. Stærk eller vedvarende smerte kan være tegn på en alvorlig lidelse. Søg lægehjælp ved sådanne symptomer. Gravide samt patienter, der skal opereres eller netop er blevet det, bør kun bruge produktet, hvis lægen anbefaler det.

FORBEREDELSE AF QUIKDRAW PRO™

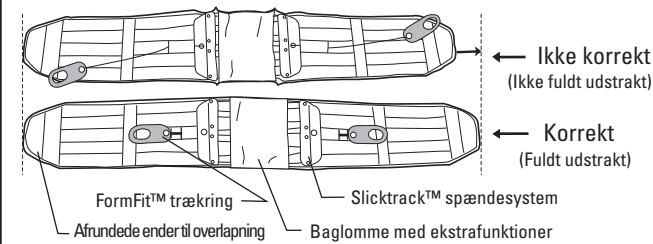


Bæltet skal strækkes ud i sin fulde længde før brug. FormFit™ snorenes trækning skal sidde helt inde. Hvis ikke, kan bæltet ikke strækkes ud til fuld længde. Når bæltet tages af, skal trækningene sidde korrekt tilbagetrukket som vist i nederste illustration.


PLACERING

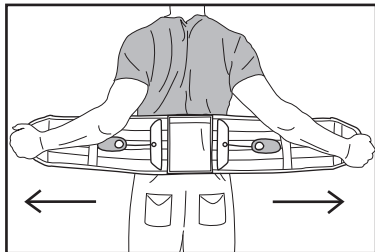


1. Hold det fuldt udstrakte bælte ind til lænden og sørg for, at bagstykket placeres midt på og lavt på ryggen.

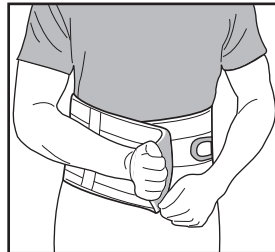


2. Lad bæltets afrundede ender overlape hinanden, så velcrobåndene kan få fat i hinanden.

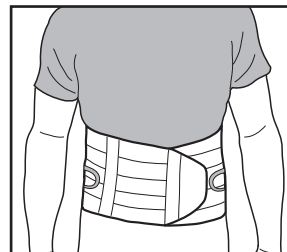


3. Tag en dyb indånding og sæt bæltet så stramt som muligt.

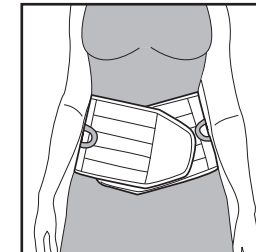

4. OBS: For at få bæltet til at sidde tæt og behageligt er det ofte nødvendigt at vinkle de to sidestykker som vist.

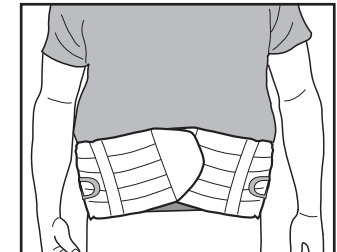


SÅDAN STRAMMES BÆLTET

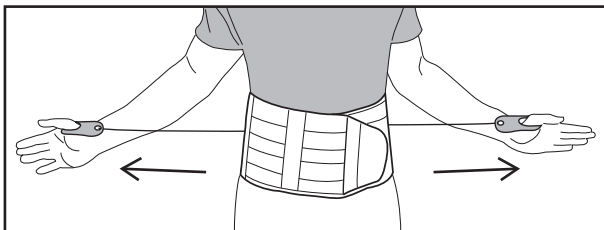


5. Sæt tommelfingrene ind i FormFit™ snorenes trækninge. Træk ringene ud og væk fra bæltet. Den venstre træksnor regulerer spændingen i nederste del af bæltet, mens den højre træksnor regulerer øverste del af bæltet. Justér og stram bæltet ved at trække lidt eller meget i snorene.


JUSTERING

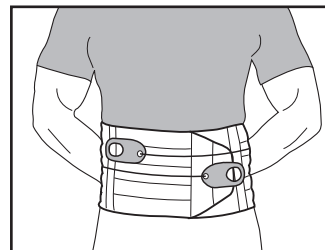


6. FormFit™ snorenes trækninge sættes fast ved at presse ringenes velcroside mod bæltets velcroflade. Yderligere justering kan foretages ved at løsne velcrolukningen, stramme eller løsne snorene og flytte trækningene. OBS: Hvis man skal sidde ned, kan det være en god idé at løsne træksnorene i både den øverste og nederste del af bæltet.

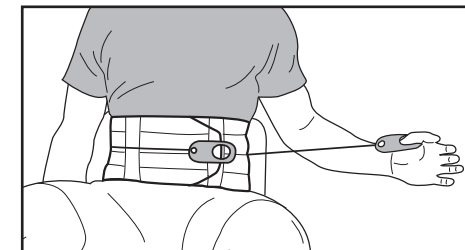

BAGSTYKKETS FUNKTIONER

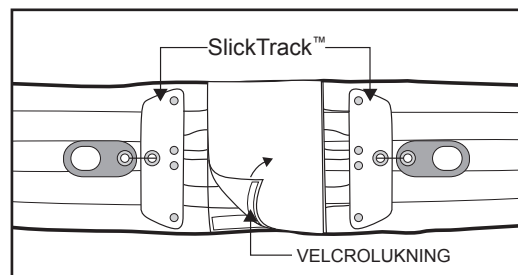

1. Bagstykket mellem SlickTrack™-systemets endestykker indeholder en lomme, der åbnes ved at løsne velcrolukningen.

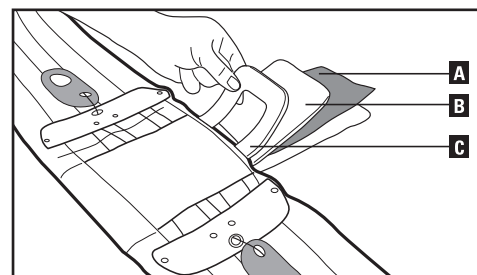

2. Lommen indeholder et stift bagpanel samt en skumpude. Der er også plads til en kold pakning.

- A** For yderligere lindring kan en kold pakning indsættes i lommen. Den kolde pakning (sælges separat) placeres i baglommen i position A.
- B** Skumpuden giver en behagelig ekstra polstring mellem lænden og det stive bagpanel. Skumpuden ligger i baglommen i position B.
- C** Det regulerbare, stive bagpanel kan efterligne ryggradskrumningen i lænden. Dette panel ligger i baglommen i position C.



Aspen QuikDraw PRO™ fås i mange forskellige størrelser efter livmål:

QUIKDRAW Pain Relief Orthosis		Men's Pant Size	Women's Pant Size
Extra small	46 to 61 cm.	22 to 26 in.	Child - 0
Small	68 to 81 cm.	26 to 30 in.	2 - 4
Medium	79 to 94 cm.	30 to 34 in.	6 - 10
Large	91 to 107 cm.	34 to 38 in.	12 - 16
Extra Large	104 to 119 cm.	38 to 44 in.	18 - 22
Extra Extra Large	117 to 145 cm.	44 to 54 in.	24 - 34



FISCHERMEDICAL

Fischer Medical ApS • Lyngby Hovedgade 17
DK-2800 Kgs. Lyngby • Telf. +45 45 93 81 00
www.fischermedical.dk



ASPEN MEDICAL PRODUCTS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR LIABILITY FOR INJURY OR DAMAGE BY REASON OF ANY APPLICATION OF THIS PRODUCT. PLEASE SEE THE ACCOMPANYING LIMITED WARRANTY FOR FURTHER INFORMATION IN THIS REGARD.

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, Irvine, CA, 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products shall have no obligation under this limited warranty in the event:

- (a) The product was not purchased from Aspen Medical Products or through its authorized channels of distribution;
- (b) The product is altered;
- (c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products are inserted into the product; or
- (d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS.


This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

Warning: To ensure proper use, please review all material.

A listing of authorized distributors in your area is available upon request.



6481 Oak Canyon
Irvine, CA 92618
949-681-0200
800-295-2776
www.aspenmp.com

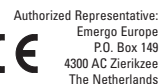

© 2005 Aspen Medical Products, Inc. All Rights Reserved.

PATENT PENDING

PR0005 REV. J 6/05